


## Tekerlekli Sandalye

BME4611C



## 1. TEKERLEKLİ SANDALYENİN BÖLÜMLERİ

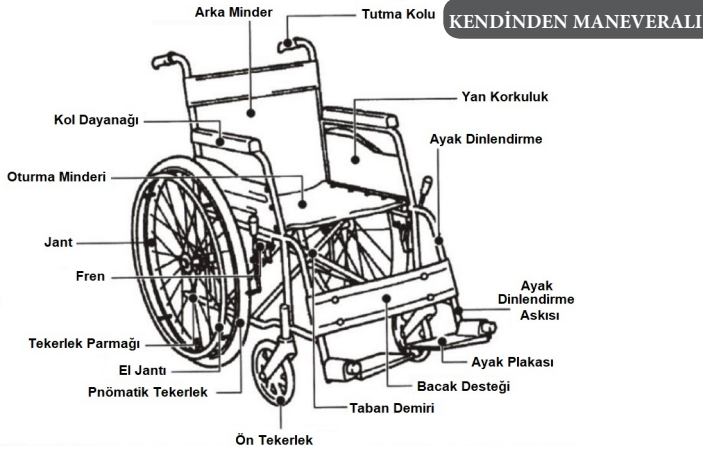

## 2. TEKERLEKLİ SANDALYENİN AÇILMASI

## SABİT SIRTLIKLILIK



Gerekli Aksesuarlar



User Manual



## ADIM 1

Tekerlekli sandalyenin arkasında durun ve sandalyeyi açmak için dışarı doğru çekin.



## ADIM 2

Sonra, açmak için koltuğa bastırın.




## DİKKAT

Elinizi veya parmağınızı koltuk borusuna veya koltuğun altına koymayın.


## 3. AYAK PLAKASI YÜKSEKLİĞİNİN AYARLANMASI

## METOD 1

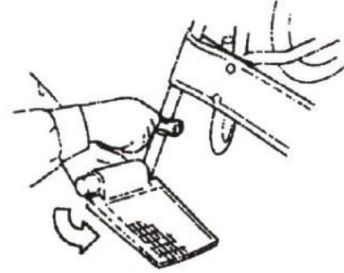

Ayak plakasını ok yönünde çevirin ve yüksekliğini ayarlayın. Daha sonra verilen anahtar ile kademeli borunun yan tarafındaki somunu sıkın.

## METOD 2


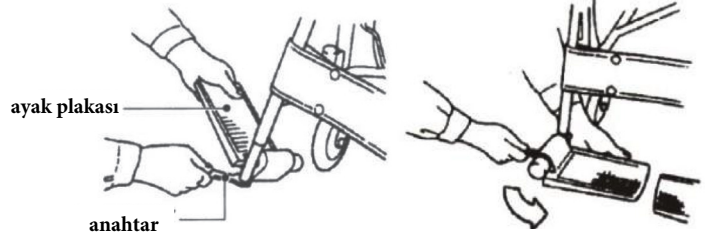


1. Anahtarı kullanarak basamaklı borunun ayak plakasına civatalı olduğu kısmını hafifçe gevşetin.

2. Ayak plakasını ok yönünde çevirin. Ardından ayak plakasını sabitleyin.




## DİKKAT

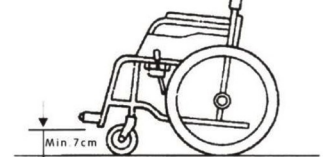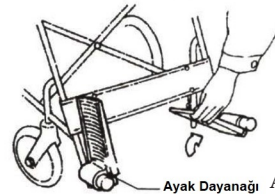

Tekerlekli sandalyeye binerken veya inerken ayak plakasını yukarı çevirin.

Ayak plakasının yerden en az 7 cm yukarıda olduğundan emin olun. Çok düşük yerleştirilmiş engelli zeminde seyahat ederken ayak plakası engellere çarparak tekerlekli sandalyenin dengesinin bozulmasına neden olur.

#### 4. TEKERLEKLİ SANDALYENİN KATLANMASI

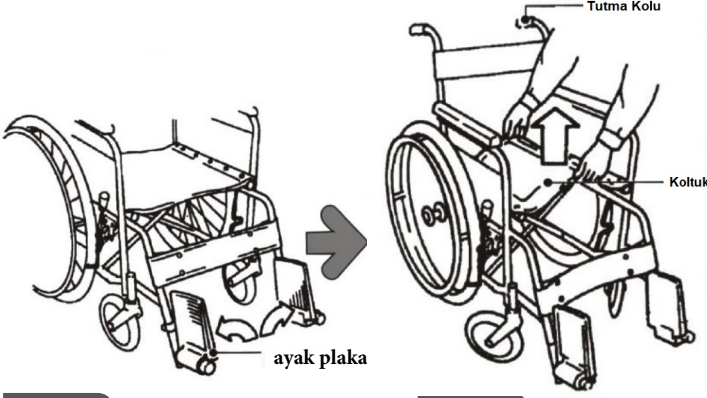


##### ADIM 1

1. Taban plakasını okların yönünde yukarı çevirin.

##### ADIM 2

2. Tekerlekli sandalyeyi katlamak için koltuğun ortasını kaldırın.


3. Tekerlekli sandalyeyi herhangi bir ateş kaynağının yakınına koymayın, aksi halde sırt minderi alev alarak yaralanmalara neden olabilir.

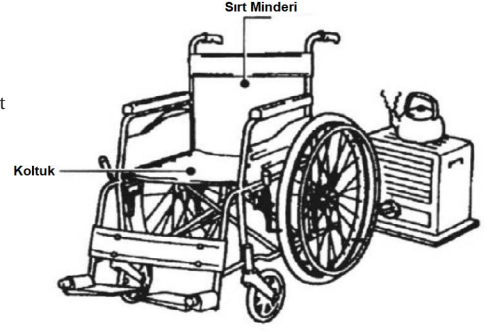

4. Bir basamak yukarı çıkmak.



Tekerlekli sandalyeyi iten hasta bakıcı, devrilme çubuğuna basmalı ve ön teker basamak üzerine çıkacak şekilde kulpları aşağı doğru itmeli. Ardından, arka tekerlekleri kaldırmak için tutamaçlardan yukarı doğru çekin. Adımları zorla itmeye çalışmayın.

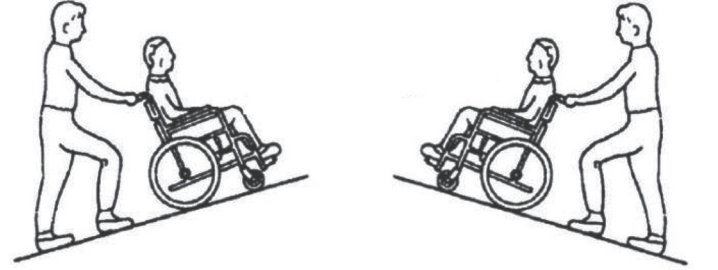

5. Yokuş yukarı veya aşağı hareket etmek için, tekerlekli sandalyeyi desteklemek üzere bir bakıcının yakınlarda olduğundan emin olun; aksi halde sandalye devrilebilir. Dik bir aşağı eğim için, tekerlekli sandalye yukarı bakacak şekilde döndürülmelidir. Ve bakıcı sandalyeyi kademeli olarak aşağı doğru geri almalıdır.


6. Tekerlekli sandalyeyi üzerinde hasta varken kaldırırken, koltuğun arkasını katlanabilir durumda ise kollarla tutmayın. Aksi takdirde koltuk arkası zarar görebilir.



#### ⚠ DİKKAT

1. Kısa süreli bile olsa frene basmayı unutmayınız. Frene basmayı alışkanlık haline getirin.
2. Tekerlekli sandalye ani durmaları engelleyemez, bu sebeple kullanırken hız yapmayın.
3. Keskin bir virajda dönerken devrilmeyi önlemek için hızı azaltın.
4. Tekerlekli sandalyeyi hareket ettirmeden önce hastanın ayaklarının ayak plakasında olduğundan emin olun.
5. Her zaman önce güvenliği sağlayın. Hasta yalnız kalmak konusunda kendini güvensiz hissediyorsa, devam etmeden önce yardım istemelidir.

#### 6. TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

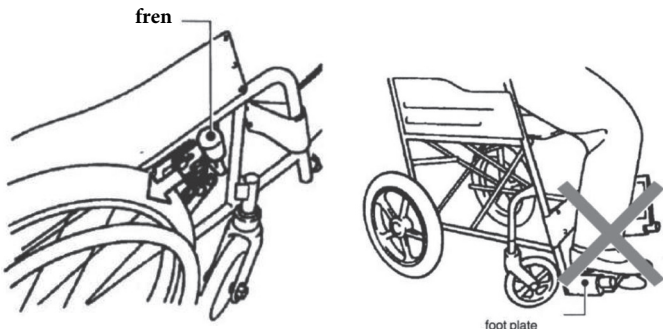

1. Tekerlekli sandalyeye binerken/ inerken frenin kilitli olduğundan emin olun.

2. Tekerlekli sandalyeden inerken ayak plakasına basmayın, aksi halde sandalye öne doğru devrilir.



Shanghai Brother Medical Products Manufacturer Co., Ltd.  
718, Fanou Modern Building, No 2449 Gonghexin Road,  
Jingan District, Shanghai City, P.R.C

#### İTHALATÇI: ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.

Maltepe Mah. Hastane Sok. No:6 Zeytinburnu/İstanbul/Türkiye  
www.respirox.com.tr / www.ecemedikal.net Tel: 444 78 96

EC REP

SUNGO Europe B.V.  
Olympisch Stadion 24, 1076DE  
Amsterdam, Netherlands

Basım Tarihi: 14.12.2022


# USER MANUAL

## Foldable Wheelchair

**BMB4611C**




### 1. PARTS OF THE WHEELCHAIR

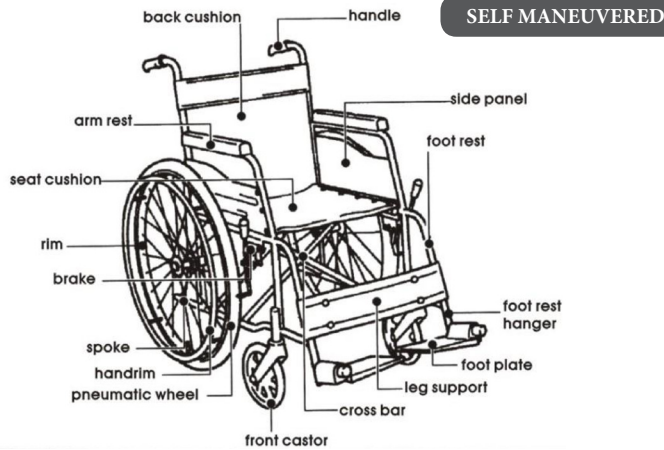

### 2. HOW TO UNFOLD THIS WHEELCHAIR

**WITH FIXED BACKREST**

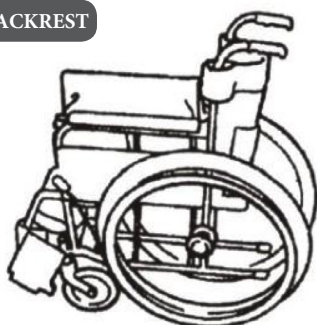

**Required Accessories**




User Manual




**STEP 1**

Stand behind the wheelchair and pull it outwards to open up the chair

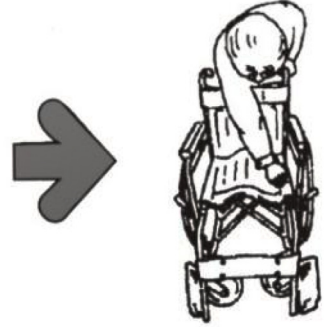

**STEP 2**

Next, press the seat down to open it.

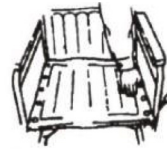

Seat pipe




**CAUTION**

Do not place your hand or finger at the seat pipe or beneath the seat


### 3. ADJUSTING THE HEIGHT OF THE FOOT PLATE

**METHOD 1**

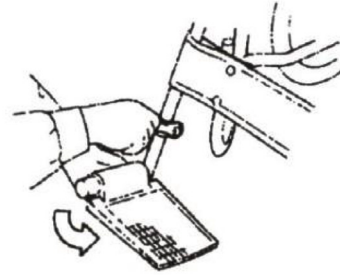

Turn the foot plate in the direction of the arrow, and adjust its height. Then tighten the nut at the side of the step pipe with the spanner provided.

**METHOD 2**

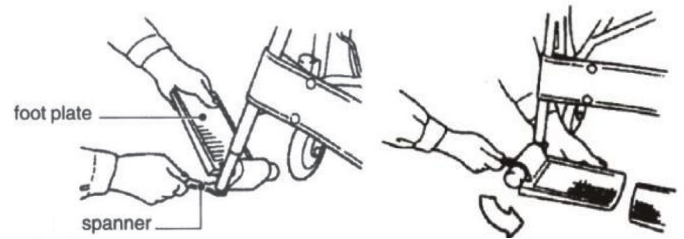


1. Using the spanner slightly loosen the portion of the step pipe where it is bolted to the foot plate


2. Turn the foot plate in the direction of the arrow. Then fix the foot plate



**CAUTION**

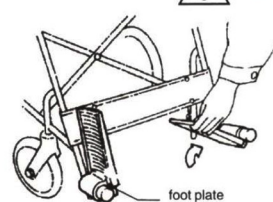


foot plate

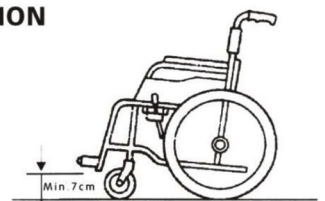

Ensure that foot plate is at least 7 cm above the ground. If placed too low. The foot plate will hit obstacles when travelling on uneven ground, causing the wheelchair to be off-balance

Flip the foot plate up whenever getting on or off the wheelchair

#### 4. FOLDING THE WHEELCHAIR

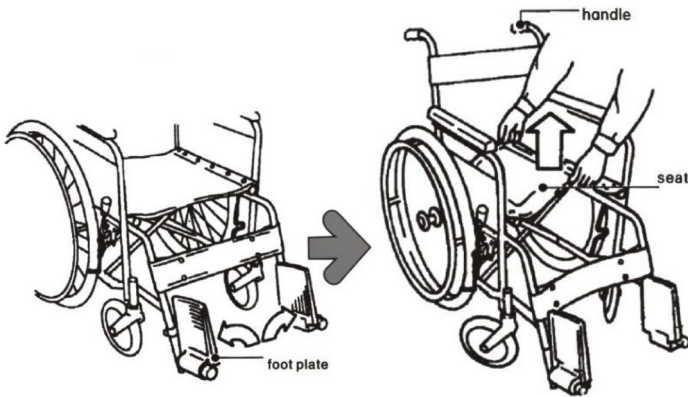


##### STEP 1

1. Flip the footplate upwards in the direction of the arrows

##### STEP 2

2. Lift the centre of the seat up to fold the wheelchair.

#### 5. USING THE BRAKES

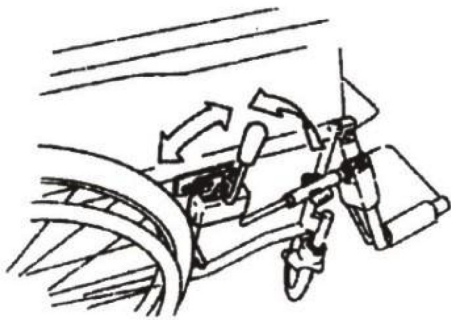


Pull the brake levers on either side backwards to lock the wheelchair. To release the brake, push it forward.

#### ⚠ CAUTION

1. Do remember to engage the brake even when stopping for a short while. Make it a habit to engage brakes
2. The wheelchair is unable to execute sudden stop, so do not speed while on it.
3. When turning at a sharp corner, reduce speed to avoid tipping over.
4. Before moving the wheelchair, ensure that the patient has his/her feet on the foot plate.
5. Always ensure safety first. If the patient feels unsafe being alone, he/she should ask for assistance before proceeding.



#### 6. POINTS TO NOTE WHEN USING THE WHEELCHAIR

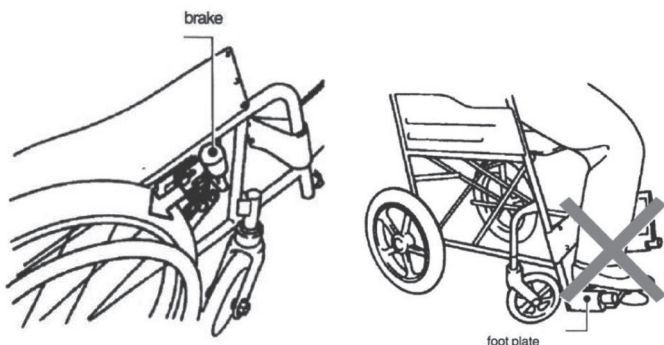


1. Ensure that the brake is locked when getting on/off the wheelchair. Refer to page 6 on how to use the brake

2. Do not step on the foot plate when getting off the wheelchair or else the chair will tip forward.

3. Do not place the wheelchair near any sources of fire, or else the backrest may be set on fire, resulting in injuries.

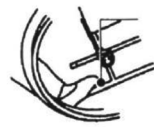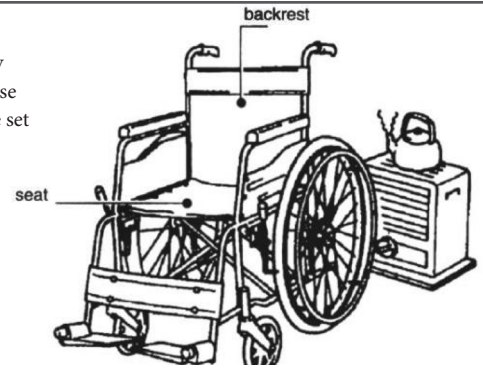

4. To move up a step. The care giver pushing the wheelchair must step on the tipping bar and push downwards at the handles, such that the front wheel caster are raised onto the step. Next, pull upwards at the handles to bring up the rear wheels. Do not try to push over the steps by force.

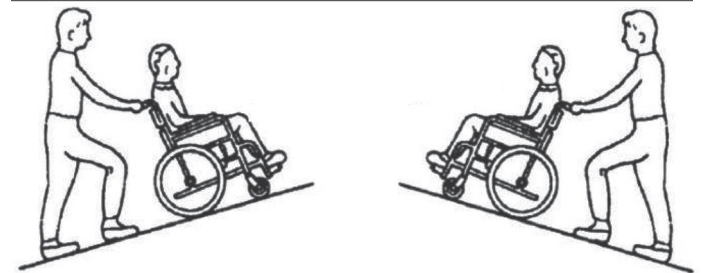

5. to move up or down slope, ensure that a care giver is around to support the wheelchair; otherwise, the chair may overturn. For a steep downward slope, the wheelchair should be turned to face up slope. And the care giver should back the chair downwards gradually.

6. When lifting a wheelchair with the patient on it, do not hold on to the handles if the chair's backrest is the foldable kind. Otherwise, the backrest may be damaged.



Shanghai Brother Medical Products Manufacturer Co., Ltd.  
718, Fanou Modern Building, No 2449 Gonghexin Road,  
Jingan District, Shanghai City, P.R.C

#### İTHALATÇI: ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.

Maltepe Mah. Hastane Sok. No:6 Zeytinburnu/İstanbul/Türkiye  
www.respirox.com.tr / www.ecemedikal.net Tel: 444 78 96

EC REP

SUNGO Europe B.V.  
Olympisch Stadion 24, 1076DE  
Amsterdam, Netherlands

Date of issue: 14.12.2022